

## METHOD FOR ANALYZING PROTEIN STRUCTURE

**Publication number:** JP2208579

**Publication date:** 1990-08-20

**Inventor:** NAKAMURA HARUKI; NAGAYAMA KUNIAKI;  
YAMAZAKI TOSHIO

**Applicant:** JEOL LTD

**Classification:**

- **international:** G01N24/12; G01N24/00; G01R33/28; G01R33/32;  
G01N24/00; G01R33/28; G01R33/32; (IPC1-7):  
G01N24/12; G01R33/28

- **European:**

**Application number:** JP19890029261 19890207

**Priority number(s):** JP19890029261 19890207

**Report a data error here**

### Abstract of JP2208579

**PURPOSE:** To make it possible to analyze the structure of protein having the large molecular weight accurately by performing three-dimensional NMR measurement of  $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$  different nuclides for specimen to be checked incorporating the protein labeled as  $^2\text{H}$  and  $^{15}\text{N}$ .

**CONSTITUTION:** Three-dimensional NMR of  $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$  is performed for a specimen to be checked incorporating protein labeled as  $^2\text{H}$  and  $^{15}\text{N}$ . At first HMQC- COSY is performed. With respect to separated peak, amino-acid spin based identification is performed. Then, NOESY-HMQC is performed. The linking data of the neighboring amino acid are obtained based on the obtained spectrum. The linking data of the amino acid in NMR obtained in both measurements are compared with the arrangement of the amino acid of a known primary structure, and attribution is determined. In this way, the structure can be accurately analyzed even for the protein specimen having the large molecular weight.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑫ 公開特許公報(A) 平2-208579

⑤ Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)8月20日

G 01 R 33/28

G 01 N 24/12

7621-2G  
7621-2GG 01 N 24/02  
24/12U  
M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 蛋白質の構造解析方法

⑯ 特 願 平1-29261

⑰ 出 願 平1(1989)2月7日

⑱ 発 明 者 中 村 春 木 大阪府吹田市古江台6-2-3 株式会社蛋白質工学研究所内  
⑱ 発 明 者 永 山 国 昭 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内  
⑱ 発 明 者 山 崎 俊 夫 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内  
⑲ 出 願 人 日本電子株式会社 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

蛋白質の構造解析方法

## 2. 特許請求の範囲

(1) <sup>2</sup>Hラベル及び<sup>15</sup>Nラベルされた蛋白質を含む被検試料について<sup>15</sup>N-<sup>1</sup>H異核種3次元NMR測定を行い、得られたデータに基づいて構造解析を行うことを特徴とする蛋白質の構造解析方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は、核磁気共鳴(NMR)スペクトルに基づいて蛋白質の構造解析を行う際に用いられる構造解析方法に関するものである。

## 〔従来技術〕

NMRを利用した蛋白質の構造解析方法が、スイスのWüthrich等により開発されている。この方法は、COSYタイプ及びNOEタイプの2次元NMRを使用すると共に、蛋白質の化学構造の特殊性を考慮し、3つのステップからなる一般的

な体系的な構造解析方法である。

例えば、第2図(a)に示すような<sup>1</sup>H-NMRスペクトルが、同図(b)に示すような蛋白質について得られたとする。このスペクトル中の各ピークが具体的に第2図(b)のペプチドのどの水素核に由来しているのかを確定するのが帰属問題である。

2次元NMRを利用した上記従来法では、それを次の3つのステップで行う。

(1) COSY 2次元NMRスペクトルもしくはその類似スペクトルで各アミノ酸に属するスピンを同定する。その際、第3図のような2次元パターンが利用される。

(2) 隣接するアミノ酸のつながりの情報を得るために、NOESY 2次元NMRスペクトルを測定する。その際、第4図に示すアミド水素(NH)の隣接基とのNOEが利用される。

(3) (1)、(2)で得たNMR的アミノ酸のつながりの情報を既知の一次構造のアミノ酸配列(第2図(b))と比較し帰属を決定する。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、水素核 ( $^1\text{H}$ ) NMRスペクトルを用いたこの方法は、分子量1万以下の蛋白質についてはかなり成功しているが、分子量がそれ以上のものでは、アミド水素 (NH) の  $^1\text{H}$ -NMRスペクトルにおける化学シフトの重なりのため、例えば2次元NMR上でパターンとして分離できても帰属に曖昧さが残ってしまう。

例として、分子量6000のBPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor) と分子量11700のチオレドキシン (E. Coll TRX) について、アミド水素のピークの重なりをヒストグラムを第5図に示した。図から分るように、BPTIではよく分離したアミド水素 (縮退度1) が最も多く、縮退度3、4は急速になくなっている。

一方、チオレドキシンは、分子量に比例したピークの広がり0.02 ppmをとった場合、縮退度2が最も多く、しかも、縮退度6に及ぶ激しいピークの重なりを持つ。

このように、従来法では、蛋白質の分子量が大

分離すれば良い。

上記①のピークの狭小化は、重水素核 ( $^2\text{H}$ ) の一線部分ラベル法で解決できることがLeMaster等により示された (Biochemistry 24, 7263 (1988))。その原理は重水素核の導入により、スピンをAX化し、ピークの微細構造を単純化することにある。第6図にその例を示す。 $^2\text{H}$ ラベルしていないもののスペクトルAに比べ、 $^2\text{H}$ ラベルしたもののスペクトルBは、各ピークが狭小化されると共に、微細構造が簡易化されていることが分かる。尚、この場合、試料中の水素核を75%の割合で重水素に置換している。

上記②の新次元の導入によるピークの分離は、 $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$  COSY 2次元NMR ( $^{15}\text{N}$  HMQC) により可能となる。そのスペクトルの例を第7図に示した。この図は、横軸が  $^1\text{H}$ -NMR、縦軸が  $^{15}\text{N}$ -NMRで、分子量16000の蛋白質ペプチドアミドNHの2次元相関スペクトルである。この図から、もし、 $^{15}\text{N}$ 核による縦方向の分離を行わなければ、 $\pm 0.02$  ppmの広がりでは $\sim 1$

きになると、スペクトル中のピークの重なりが激しくなって構造解析が事実上不可能になってしまう。

本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、大きな分子量の蛋白質であっても解析が可能な構造解析方法を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

この目的を達成するため、本発明の構造解析方法は、 $^2\text{H}$ ラベル及び $^{15}\text{N}$ ラベルされた蛋白質を含む被検試料について $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ 異核種3次元NMR測定を行い、得られたデータに基づいて構造解析を行うことを特徴としている。

【作用】

以下、本発明を詳説する。

上述のような激しいピークの重なりを減らすには、①ピークを狭小化し、本来の分離を向上させるとともに、②  $^1\text{H}$ -NMRに新しい次元即ち $^{15}\text{N}$ -NMRを導入し、両者の2次元相関スペクトルを測定し、その新次元軸上で水素核のピークを

0個、 $\pm 0.01$  ppmを取っても $\sim 5$ 個の化学シフトの重なりがあることが理解される。

従って、 $^1\text{H}$ -NMRにおけるピークの分離を基礎とした従来の帰属方法は、この蛋白質分子には適用不可能ということになる。

以上の考察から、本発明者は、①と②の方法を取り入れた3次元NMRにより分子量が大きくても帰属を決定できることを見出した。

【実施例】

第1図は、本発明の一例を示す流れ図である。第1図に示すように、本発明の構造解析方法においては、

(0) 先ず、 $^2\text{H}$ ラベル及び $^{15}\text{N}$ ラベルされた蛋白質を含む被検試料が用意される。

(1) 次に、 $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$  3次元NMR例えばHMQC-COSYが実施され、分離されたピークに対しアミノ酸スピン系の同定が行われる。第8図に示すような2次元NMRを用いた従来法では重なり合って分離が困難なピークも、第8図(b)に示すような3次元NMRを用いた本発明では、

新たに導入された $^{15}\text{N}$ の軸方向に水素核のピークが分離されているため、曖昧さのない同定が可能である。

(2) 次に、 $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ 3次元NMR例えばNOESY-HMQCが実施され、得られたスペクトルに基づいて隣接するアミノ酸のつながりの情報を得る。

(3) (1), (2) で得たNMRのアミノ酸のつながりの情報を既知の一次構造のアミノ酸配列と比較し、帰属を決定する。

尚、 $^2\text{H}$ のラベル化率 $L\text{H}$  (%) は、 $0 < L\text{H} \leq 100$  で、ランダムな部分又は全ラベル、 $^{15}\text{N}$ のラベル化率 $L\text{N}$  (%) は、 $80 \leq L\text{N} \leq 100$  で、ランダムな部分又は全ラベルが好ましい。

また、上記(1), (2)の測定は、試料を軽水と混合して実施される。特に、100%  $^2\text{H}$ ラベルした場合、そのままでは $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ 3次元NMRの $^1\text{H}$ の信号が出てこないが、軽水と混合すると、 $^{15}\text{N}$ と結合している $^2\text{H}$ だけが $^1\text{H}$ に置換されるため、アミド水素のピークだけが出現し、

ピークが一層簡単化され、帰属の決定が容易になる。

前記(1)における $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ 3次元NMR測定は、HMQC-COSYに限らず、これと同等の情報が得られれば、例えばCOSY-HMQC, HMQC-RELAY, RELAY-HMQC, HMQC-HOHAHA, HOHAHA-HMQC等の各種測定法が使用できる。

また、上記(2)における $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ 3次元NMR測定は、NOESY-HMQCに限らず、これと同等の情報が得られれば、例えばHMQC-NOESY等の測定法も使用できる。


#### 【効果】

以上詳述した如く、本発明によれば、分子量の大きな蛋白質試料であっても、正確に構造解析を行うことの出来る方法が実現される。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の一実施例を示す流れ図、第2図は蛋白質の一次構造及びその $^1\text{H}$ -NMRスペクトルを示す図、第3図は2次元パターンを示す

図、第4図はアミド水素(NH)の隣接基とのNOEを説明する図、第5図はアミド水素のピークの重なりを示す図、第6図は $^2\text{H}$ ラベルの有無によるスペクトルの違いを示す図、第7図は $^{15}\text{N}$ - $^1\text{H}$ COSY 2次元NMR ( $^{15}\text{N}$  HMQC) スペクトルの例を示す図、第8図は2次元NMRと3次元NMRを比較した図である。

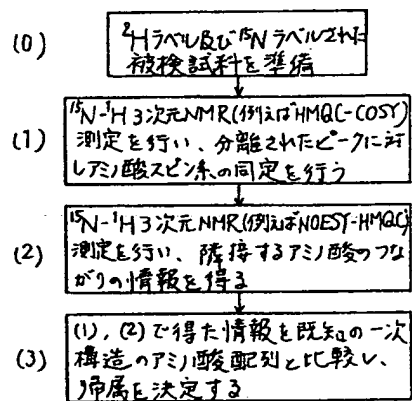


才1図


特許出願人 日本電子株式会社

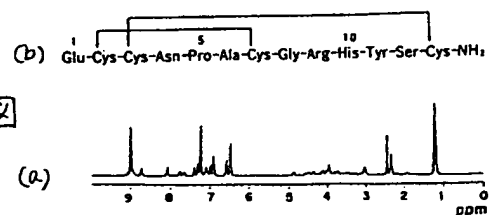


才2図

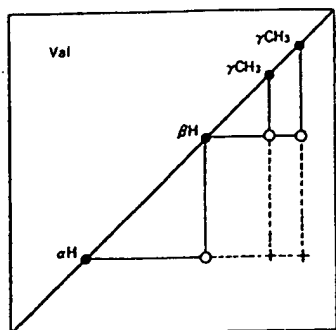


Val の COSY(O) と RELAY(+)  
のパターン  
オ3図

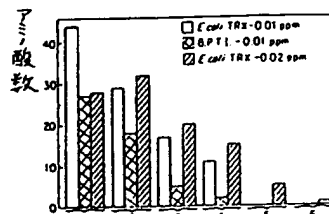


Val のアミ酸数  
オ5図

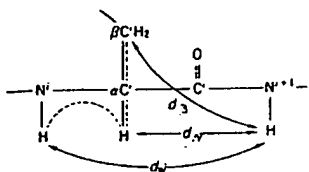

オ4図

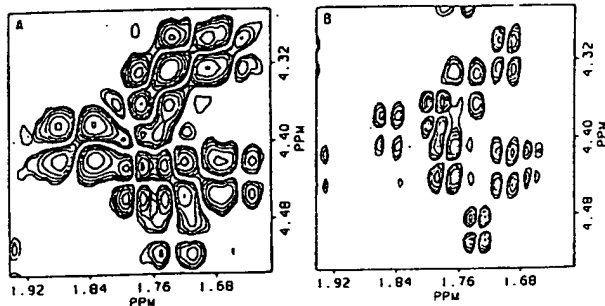

オ6図

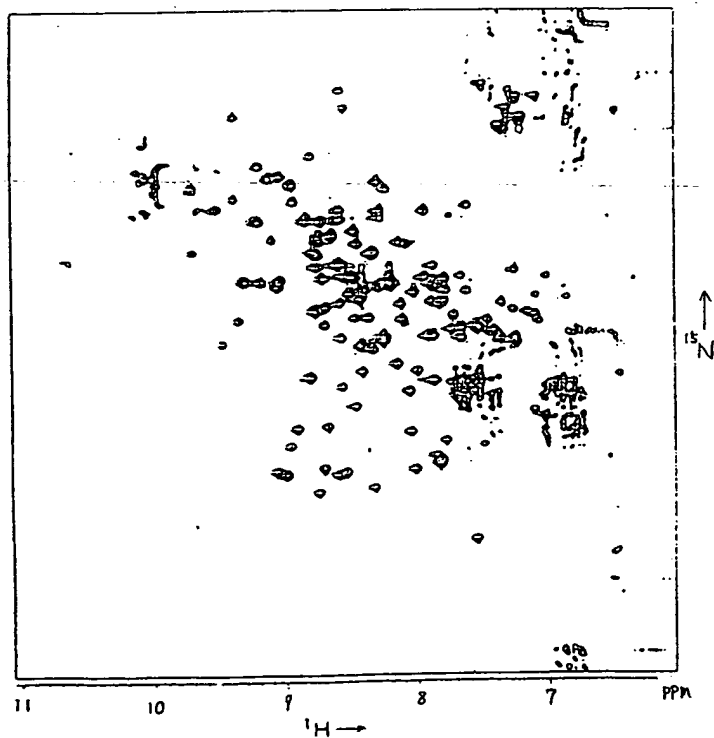

オ7図

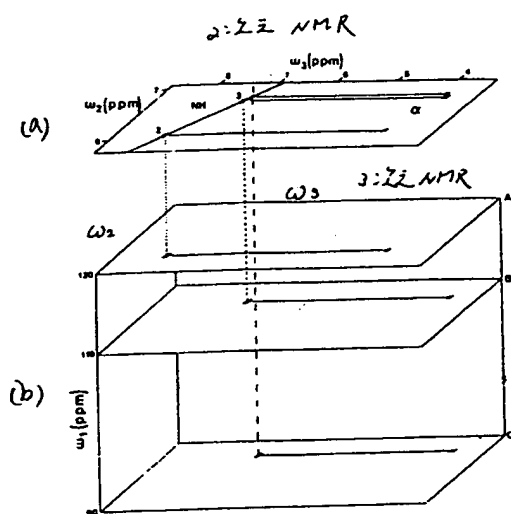


図8